


**フリッチュ社 (ドイツ) とグローブボックス・ジャパン社 (日本) は  
合体し、遊星型ボールミルPremium Line P-7を  
専用のグローブボックスに内蔵することに成功しました。  
これにより研究室のスペース効率を解決できます。**



### Premium Line P-7

- 常識を破る粉碎パワー  
台盤回転数：1,100rpm  
ポット回転数：2,200rpm  
重力加速度：97G
- これによりNANO領域の世界に到達可能
- 本体は卓上型。加えて軽量
- 容器、ボールの材質、大きさも多種多様

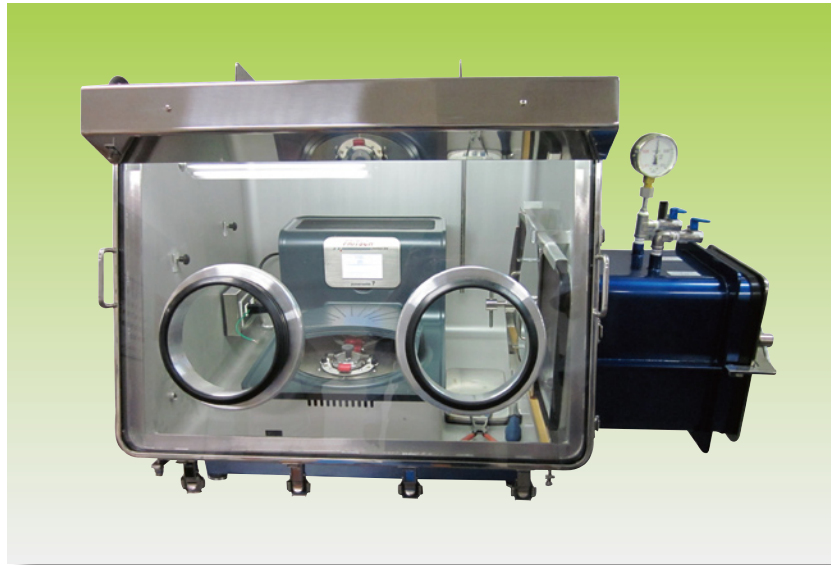

### 専用グローブボックス

- 前面窓は強化ガラスまたはレキサン (ポリカーボネイト) を選択可能  
ワンタッチクリップ方式を採用しており、取り外しは1分以内
- これによりPL本体の出し入れだけでなくグローブボックス内で容器の着脱が可能
- コンセントは内部に。電子天秤等の備品も設置出来る内部構造に
- フットスイッチ式内圧調整器を標準装備

## 両機種の特徴

### Premium Line P-7

- 自転公転比は 1 : -2
- 台盤回転数 : 100~1,100rpm  
ポット回転数 : 200~2,200rpm
- 容器、ボールの材質 : メノー、アルミナ、ジルコニア、ステンレス、チッカ珪素、クローム鋼、WCCO
- 容器の大きさ : 80, 45, 20mL
- 寸法 : W580×D400×H360mm  
重量 : 44kg

### 専用グローブボックス

- 前面窓の固定はワンタッチクリップ。その取り外しはたった1分以内。機器の出し入れだけでなく、メンテナンス、清掃が極めて容易
- パスボックス内扉はスライド式。  
メインボックス内部を有効使用可能
- 不活性ガス循環精製装置を取り付けることにより低酸素、低露点下での粉碎可能
- 寸法 : W800×D700×H650mm  
重量 : 125kg

## セット特別価格一例

PL本体×1、ジルコニア製容器45cc×1、  
ダミー×1、ジルコニアビーズ×1、  
専用グローブボックス×1

※他の材質に関しては、お問い合わせください。

### フリツシュ・ジャパン株式会社

〒231-0023 横浜市中区山下町252  
TEL 045-641-8550 FAX 045-641-8364

#### 大阪営業所

〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-12-5  
TEL 06-6390-0520 FAX 06-6390-0521

E-mail: [info@fritsch.co.jp](mailto:info@fritsch.co.jp)  
URL <http://www.fritsch.co.jp>

### 株式会社 グローブボックス・ジャパン

〒206-0804 東京都稲城市百村1188  
TEL 042-379-9624 FAX 042-379-9627

E-mail: [info@gbjp.jp](mailto:info@gbjp.jp)

URL <http://www.gbjp.jp>